



Grid Pad

Kom i gang
Grid Pad Go 10

Vedlikehold av din GridPad

Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk.

Rengjøring

Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere risikoen for at bakterier overføres mellom brukere bør maskinen rengjøres regelmessig med en rensesklut.

For en kraftigere rengjøring kan du bruke en alkohol-basert klut etter at du har rengjort med renseskluten.


Beskyttelse

Grid Pad Go 10 er klassifisert til IP-65 for beskyttelse mot sprut og dråper, med forseglede porter og et tøft eksteriør. Enheten er bygd for å motstå en dråpe på 1,2mol.

Bluetooth-høytaleren er klassifisert til IPX4 med beskyttelse mot sprut og regn.


Slå på GridPad

For å slå på GridPad trykker du inn på-knappen øverst på enheten.

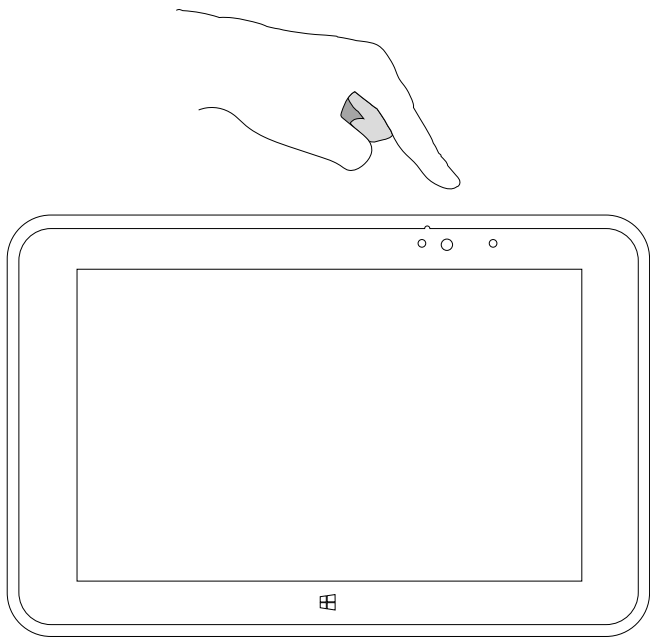


Lade GridPad

For å lade GridPad må den kobles til strøm og kontakten settes i enheten som vist nedenfor.

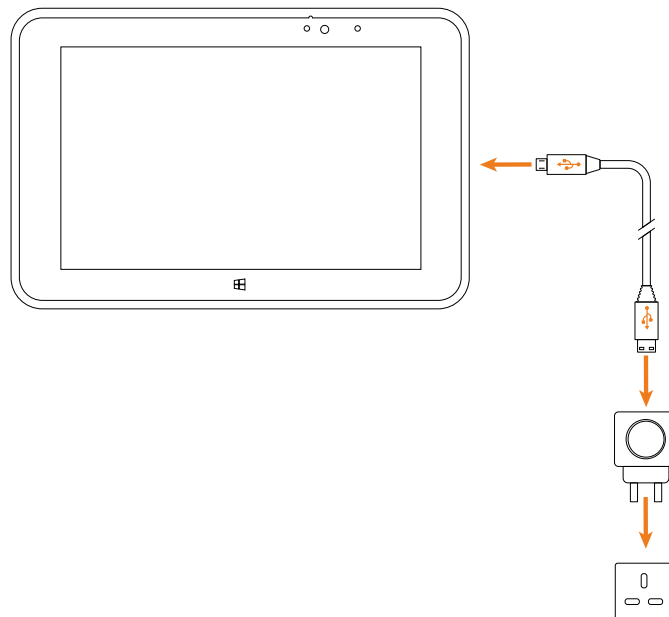

Bluetooth speaker

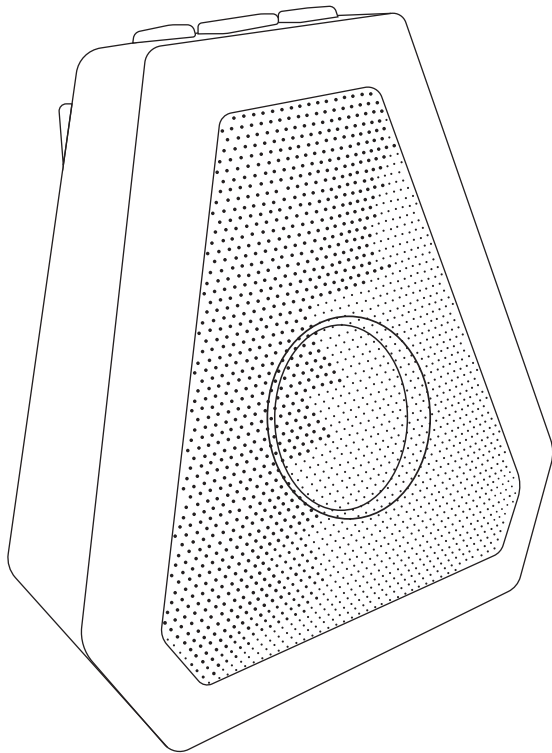

GridPad har en Bluetooth-høytaler av høy kvalitet.

En lader følger med høytalerne. Batteritid vil variere avhengig av bruk. Vi anbefaler at høytalerne lades hver gang du lader GridPad. Når høytaleren lader vil et rødt lys skru seg på.

Når høytaleren skrur seg på, spiller den en kort melodi. Et blått lys blinker når den kobler seg til GridPad.

Parre Bluetooth-høytaler

Følg trinnene nedenfor hvis du må parre Bluetooth-høytaleren med GridPad på ny:

1. Trykk på knappen i midten av toppen på høytaleren, så vil LED-lyset inne i høytaleren blinke.
2. På enheten går du til:
 PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth > Bluetooth på. Nå søker den automatisk.
 Klikk Boombot MINI.

For å skru av høytaleren, trykk og hold knappen i midten på toppen av høytaleren helt til høytaleren spiller melodien for å skru seg av.

Høytaleren kan lades ved å koble USB-porten til en 5v støpsel, eller den kan lades fra USB-porten på GridPad.

Hvis det mangler lyd

Hvis det mangler lyd, gå til **Grid Innstillinger – Tale – Hovedstemme - Konfigurer - Høytaler (her angir du Bluetooth-høytaler).**

Sjekk at du har valgt en stemme, og om volumet er justert til et passende nivå.

Hvis det fortsatt mangler lyd, trykk på **Windows Lydinnstillinger** i Høytaler-innstillinger og sjekk at lyden ikke står på dempet, eller er justert for lavt.

Spesifikasjoner

Proseszor	Intel® Atom™ CPU Z3795 1.60GHz
Minne	4GB
Harddisk	64GB
Grafikk-kort	Intel® HD Graphics
Dimensjoner (mm)	269 x 180 x 13
Kamera	2 MP foran og 8 MP bak
Skjerm	10.1" 1920 x 1200 HD Vindu
Kobles til	Wi-fi og Bluetooth
Porter	1x USB 2.0, ut-høytaler, Mini HDMI, Micro SD kortleser

Garanti

GridPad enheter er dekket av standard garanti på 2 år.

Reparasjoner

Ikke forsøk å demontere GridPad, da dette kan påvirke utstyrets garanti. Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende, kontakt din forhandler.

For mer informasjon kan du besøke www.thinksmartbox.com.

Erklæring om samtykke

Dette apparatet samsvarer med kravene til direktiv 93/42/EEC som omhandler medisinske enheter. Dette produktet er underlagt Direktiv 2002/96/EC av det Europeiske parlamentet og styret for den Europeiske Unionen om elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE), og skal ikke kastes som usortert avfall. Benytt ditt lokale avfallsanlegg for å kvitte deg med dette produktet.



Norsk oversettelse:

cognita™



Smartbox



US Office

Smartbox Assistive Technology Inc
2831 Leechburg Road
Lower Burrell
Westmoreland
PA
15068-2539

UK Office

Smartbox Assistive Technology Ltd
Smart House, 4a Court Road
Malvern, WR14 3BL, UK

+44 (0) 1684 578868
info@thinksmartbox.com